



LAMPARA INFRARROJA 2 CABEZAS

REGENERADOR CAPILAR

ULTIMA TEGNOLÓGICA

LAMPARA INFRARROJA

BOMBILLAS



CONTROL



¿Qué es el Lámpara infrarroja de 2 cabezas?



La Lámpara Infrarroja de 2 Cabezas es un equipo de terapia de luz roja diseñado para rejuvenecer la piel, tratar el acné, desintoxicar y aliviar dolores musculares. Funciona mediante luz infrarroja y roja, que estimula la producción de colágeno, mejora la circulación y reduce la inflamación, promoviendo una piel más firme, luminosa y saludable. Con una potencia de 275W, ofrece un calentamiento rápido y seguro, gracias a sus bombillas de alta eficiencia. Posee dos cabezales giratorios a 360 grados, que permiten ajustar el ángulo de luz según las necesidades del tratamiento. Su temperatura es ajustable para personalizar los procedimientos.

El equipo está fabricado en ABS de alta calidad, es respetuoso con el medio ambiente y cumple con los estándares de la UE, al no contener sustancias nocivas. Su diseño de pie con ruedas facilita su movilidad, y su estructura robusta asegura estabilidad durante el uso.

Es ideal tanto para uso doméstico como comercial en clínicas, spas o salones de belleza. Su tamaño compacto y funcionalidad versátil lo hacen una excelente opción para tratamientos estéticos y terapéuticos.

Rejuvenecimiento de la piel


Estimula la producción de colágeno, mejora la elasticidad y reduce arrugas, dejando una piel más firme y joven.

Tratamiento del acné y desintoxicación

Ayuda a reducir la inflamación, el enrojecimiento y las imperfecciones, mientras promueve la eliminación de toxinas a través de una mejor circulación.

Alivio de dolores musculares y relajación

La luz infrarroja penetra profundamente en los tejidos, proporcionando calor terapéutico para aliviar tensiones, mejorar la circulación y relajar los músculos.

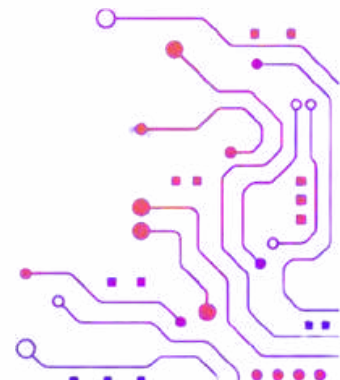

VENTAJAS

- 1. Calefacción rápida y eficiente:** Genera calor al instante, permitiendo tratamientos rápidos y efectivos.
- 2. Temperatura ajustable:** Ofrece personalización según las necesidades del usuario, mejorando la experiencia de uso.
- 3. Diseño práctico y versátil:** Cabezas giratorias a 360 grados y ruedas en la base para facilitar el movimiento y ajustar el tratamiento en distintas áreas.
- 4. Respetuosa con el medio ambiente:** Libre de sustancias nocivas como plomo, mercurio o cadmio, cumpliendo con estándares ambientales europeos.
- 5. Usos múltiples:** Ideal para tratamientos de rejuvenecimiento, acné, desintoxicación y alivio de dolores musculares, tanto en el hogar como en entornos comerciales.



ESPECIFICACIONES



| NOMBRE | LAMPARA INFRARROJA (2 CABEZAS) |
|------------------------------|---|
| Poder | 275 W |
| Color de luz | Roja + Infrarroja. |
| Rotación de cabezas | 360 grados para ajustes flexibles. |
| Distancia recomendada de uso | 30-50 cm entre la lámpara y la piel. |
| Diseño del soporte | Montaje con ruedas y base de cuatro patas para fácil movilidad. |
| Estilo | Cabezales dobles |
| Tamaño del paquete | 50 x 41 x 28 cm. |
| Voltaje | 110V/220V 50-60Hz |
| Peso del equipo | 8 kg |

TRATAMIENTO DE LA LAMPARA

El tratamiento con la Lámpara Infrarroja de 2 Cabezas es fácil de realizar y muy efectivo. Primero, es importante preparar el área a tratar, limpiando la piel con un producto adecuado para eliminar suciedad, grasa o maquillaje, y secándola completamente. Luego, configura el equipo ajustando la altura y el ángulo de las cabezas giratorias a 360° para que la luz apunte directamente al área específica del rostro o cuerpo. Posiciona la lámpara a una distancia de 30-50 cm del área tratada y ajusta la temperatura según la sensibilidad de la piel. Activa la lámpara y deja que actúe durante 10-20 minutos, dependiendo del objetivo: rejuvenecimiento, tratamiento del acné o alivio muscular. Es importante monitorear la temperatura durante la sesión para garantizar la comodidad del usuario. Al finalizar, apaga el equipo y aplica un producto hidratante o calmante en la piel para potenciar los resultados y evitar resequedad. Se recomienda realizar el tratamiento de 2 a 3 veces por semana para resultados óptimos. Evita usar la lámpara en piel dañada o con heridas abiertas, y no excedas el tiempo recomendado para prevenir irritaciones. Finalmente, evita la exposición directa al sol y usa protector solar si la zona tratada queda expuesta. Este procedimiento es seguro y efectivo tanto para el cuidado de la piel como para el alivio muscular.



mejora la circulación y estimula la producción de colágeno, rejuveneciendo la piel y aliviando tensiones musculares. Ideal para resultados visibles y bienestar.

¿Cuáles son las contraindicaciones?

- Embarazo: No se recomienda el uso en mujeres embarazadas, especialmente en el área abdominal.
- Piel dañada o con heridas abiertas: Evitar aplicar en zonas con cortes, quemaduras, infecciones o cicatrices recientes.
- Enfermedades dermatológicas graves: No debe usarse en personas con condiciones como dermatitis severa, psoriasis activa o eccema no tratado.
- Cáncer de piel o historial de cáncer: No es recomendable para personas con antecedentes de cáncer, especialmente melanoma o lesiones sospechosas.
- Uso de medicamentos fotosensibilizantes: Evitar si el usuario está bajo tratamiento con fármacos que aumenten la sensibilidad a la luz, como antibióticos o isotretinoína.
- Dispositivos médicos implantados: No debe usarse en pacientes con marcapasos u otros dispositivos electrónicos implantados cerca del área a tratar.
- Epilepsia: Evitar el uso en personas con esta condición, ya que la luz podría desencadenar crisis en casos sensibles.
- Sensibilidad extrema al calor o luz: No es apto para personas con piel hipersensible o que experimenten reacciones adversas al calor o la luz.
- Áreas tatuadas o pigmentadas artificialmente: La luz puede alterar los colores o generar irritaciones en tatuajes o pigmentaciones.
- Menores de edad: No se recomienda el uso en niños sin supervisión médica especializada.



Contacto

Dirección: Cra 34a No. 38 – 15 sur / Int 1, Colombia

Email: info@imec.com.co