



LINEA MEDICA

LIPOSONIX HORIZONTAL

LIPOSONIX HORIZONTAL



DESCRIPCIÓN

Liposonix Horizontal es un dispositivo médico estético que utiliza ultrasonidos focalizados de alta intensidad (HIFU) para eliminar grasa localizada de manera no invasiva. Ideal para tratar áreas como el abdomen, los laterales y los glúteos, ofrece una solución efectiva sin necesidad de cirugía. Este equipo utiliza ondas ultrasónicas para destruir permanentemente las células de grasa a través de una acción precisa en la piel, sin afectar los tejidos circundantes. Con una pantalla táctil TFT a color de 10,4 pulgadas, el usuario puede ajustar los parámetros del tratamiento de manera sencilla. Liposonix Horizontal actúa en profundidades de 1.3 cm y 0.8 cm, logrando resultados visibles tras una sola sesión. La máxima potencia de entrada es de 1000W y trabaja a una frecuencia de $230\text{Khz} \pm 20\text{Khz}$, garantizando una precisión óptima en la eliminación de grasa. No requiere tiempo de recuperación, haciendo que este dispositivo sea ideal para personas que buscan mejorar su contorno corporal de manera cómoda y sin complicaciones. Además, la tecnología HIFU permite un tratamiento focalizado y eficaz, proporcionando un contorno corporal mejorado en áreas específicas.

ANALISIS Y USO



Preparación del paciente:

Consulta previa: Evaluación médica y discusión de las expectativas y áreas a tratar.

Recomendaciones: Dieta y actividad física para optimizar resultados.

Preparación del dispositivo:

Encendido: Activación de la pantalla táctil TFT a color.

Configuración de parámetros: Ajuste de potencia (máx. 1000W), frecuencia (230Khz \pm 20Khz) y profundidades (1.3 cm y 0.8 cm).

Aplicación de gel conductor: Asegura una transmisión efectiva de las ondas ultrasónicas.

Proceso del tratamiento:

Colocación del aplicador: En la piel en la posición deseada.

Distribución uniforme de ondas: Realización de movimientos controlados en el área tratada.

Monitoreo continuo: Ajustes según respuesta del paciente.

Post-tratamiento:

Instrucciones al paciente: Cuidados post-tratamiento, hidratación y dieta balanceada.

Resultados visibles: Comienzan a ser evidentes en semanas.

Revisiones periódicas: Evaluación y posibles tratamientos adicionales.

BENEFICIOS Y RESULTADOS


Beneficios

- No invasivo
- Precisión en el tratamiento
- Resultados visibles
- Sin tiempo de recuperación
- Seguridad
- Versatilidad



Resultados:

- Reducción de grasa localizada
- Mejora del contorno corporal
- Efectividad a largo plazo
- Mejora en la autoestima
- Procedimiento seguro y mínimamente invasivo
- Resultados rápidos
- Sin cicatrices

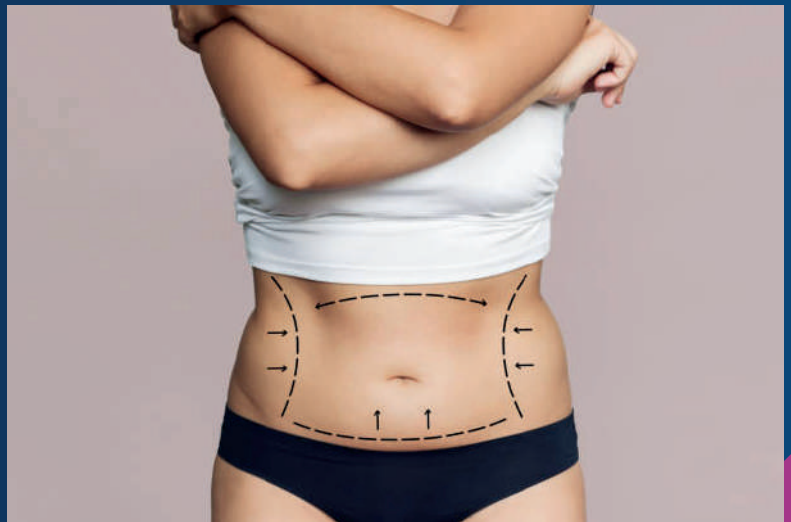



LIPOSONIX HORIZONTAL

Especificaciones Técnicas

<i>Longitud de Onda</i>	10600 nm.	<i>Tamaño del Punto</i>	0,01 mm a 0,07 mm ajustable
<i>Potencia Máxima</i>	40 W	<i>Duración del Pulso</i>	0,1 ms a 2,6 ms ajustable
<i>Tamaño del Patrón de Exploración</i>	Rango de 0,1 mm x 0,1 mm a 20 mm x 20 mm	<i>Energía del Pulso (Potencia)</i>	1 mj a 100 mj ajustable
<i>Intervalo entre Exploraciones</i>	0-6 segundos	<i>Tipo de Refrigeración</i>	Por aire
<i>Peso/ Dimensiones</i>	62KG/52X61X124 cm	<i>Sistema de Visión</i>	Brazo infrarrojo de 635 nm



Cra 34a #38-15 Sur,
Bogotá



313 -395-3827



@imec_colombia



Imec