



LINEA MEDICA

ONDAS ELECTROMAGNETICAS

ONDAS ELECTROMAGNETICAS



DESCRIPCIÓN

Este equipo utiliza ondas electromagnéticas no invasivas para estimular la contracción muscular a través de potenciales de acción, mejorando así la fuerza, calidad y resistencia muscular. Ideal para la reducción de grasa y el crecimiento muscular, incorpora un modo de entrenamiento de intervalo de alta intensidad que combina la quema de calorías con la activación muscular. Los pulsos rápidos y la alta frecuencia de las ondas electromagnéticas permiten que los músculos se contraigan de manera efectiva durante una sesión de 30 minutos, generando más de 20,000 contracciones. La tecnología se complementa con un sistema de refrigeración basado en agua y aire para mantener la eficiencia y seguridad del dispositivo. Se recomienda que los pacientes respiren conscientemente durante las sesiones para maximizar el suministro de oxígeno y energía a los músculos. Con un voltaje de entrada de AC110V y consumo de energía bajo 1500 VA, el equipo ofrece un control preciso a través de una pantalla táctil para ajustar frecuencias y tiempos de pulso según las necesidades del tratamiento.

ANALISIS Y USO



1. *Preparación previa: Consultar con un profesional de la salud, verificar las condiciones de uso del equipo, limpiar la piel y preparar el equipo para la sesión.*

2. *Ajuste del equipo: Seleccionar la frecuencia, el tiempo de pulso y la intensidad del campo magnético, y establecer el tiempo de trabajo deseado.*

3. *Realización del tratamiento: Colocar los electrodos, iniciar el tratamiento, mantener una respiración consciente y monitorear las contracciones musculares.*

4. *Finalización: Apagar el equipo, permitir la recuperación muscular y seguir las recomendaciones postratamiento.*

5. *Seguimiento: Programar sesiones adicionales según las indicaciones y realizar un seguimiento de los resultados con un profesional para ajustar parámetros según sea necesario.*

BENEFICIOS Y RESULTADOS


Beneficios

- Fortalecimiento muscular
- Reducción de grasa corporal
- Aumento del metabolismo
- Eficiencia y comodidad
- No invasivo y seguro
- Rehabilitación muscular



Resultados:

- Más de 20,000 contracciones en 30 minutos
- Incremento visible en el tono muscular
- Reducción de medidas corporales
- Optimización de fuerza y resistencia
- Resultados rápidos

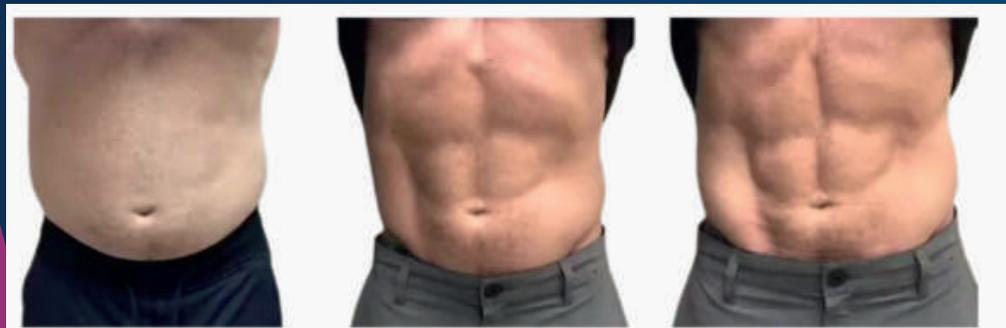



ONDAS ELECTROMAGNETICAS

Especificaciones Técnicas

<i>Voltaje de entrada</i>	AC 110V, 50/60 Hz.	<i>Tiempo de pulso</i>	1 a 15 segundos.
<i>Consumo de energía</i>	<1500 VA	<i>Intensidad del campo magnético</i>	0-7 Tesla (ajustable del 1 al 100%).
<i>Frecuencias</i>	F1 (Calentamiento): 1-80 Hz. F2 (Trabajo): 1-120 Hz. F3 (Descanso): 1-50 Hz.	<i>Tiempo de trabajo</i>	Configurable de 1 a 30 minutos.
		<i>Contracción muscular por sesión</i>	20,000 contracciones en 30 minutos.



Cra 34a #38-15 Sur,
Bogotá



313 -395-3827



@imec_colombia



Imec